




ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ NO NO SKIN ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τι είναι η συσκευή προσώπου no! no! Skin

Η συσκευή προσώπου no! no! skin είναι ένα δερματολογικά ελεγμένο προϊόν που καταπολεμά ξεχωριστά τα σπυριά της ακμής σε άτομα με ήπια έως μέτρια φλεγμονώδη ακμή. Η συσκευή προσώπου no! no! Skin είναι μία οικιακή συσκευή αντιμετώπισης της ακμής. Γρήγορη και εύκολη στην χρήση, απλά τοποθετήστε την πατενταρισμένη κεφαλή πάνω από το σπυράκι και πιέστε το κουμπί. Μια ελεγχόμενη διαδοχή παλμών φωτός και θερμότητας διεισδύει στην ερεθισμένη περιοχή του δέρματος για να καταπολεμήσει την ακμή. Στο σπίτι σας ή στον δρόμο, η συσκευή προσώπου no! no! Skin σας δίνει τη δυνατότητα να καταπολεμήσετε τα σπυράκια σαν επαγγελματίας.

Ποιοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν την συσκευή προσώπου no! no! Skin

Τύπος Ακμής		Ορισμός Ακμής	Θεραπείει η συσκευή προσώπου no! no! Skin αυτόν τον τύπο ακμής;
Μέτρια Ακμή		Πολλές φουσκάλες και σπυριά (με πύον) με φλεγμονή	Ναι
Ήπια Ακμή		Μερικές φουσκάλες (σπυριά) με φλεγμονή	Ναι
Φραγμένοι Πόροι		Μαυράδια στους πόρους και λευκές δερματικές κηλίδες με ελαφριά φλεγμονή	Όχι

Κλινικά αποδεδειγμένο

Η συσκευή προσώπου no! no! Skin έχει ελεγχθεί σε κλινική μελέτη σε σύγκριση με μία συσκευή placebo. Σε αυτή τη μελέτη, οι συμμετέχοντες δεν γνώριζαν το είδος της συσκευής το οποίο παρέλαβαν, αν ήταν μια λειτουργική συσκευή προσώπου no! no! Skin ή μια συσκευή placebo. Κάθε συμμετέχοντας κούραρε 4 σπυριά προσώπου της επιλογής του για 2 φορές την ημέρα για 4 μέρες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι καθάριζε γρηγορότερα στους συμμετέχοντες που χρησιμοποίησαν τη συσκευή προσώπου no! no! Skin σε σχέση με αυτούς που χρησιμοποιούσαν τη συσκευή placebo.

Πως λειτουργεί

Η συσκευή προσώπου no! no! Skin χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη μορφή τεχνολογίας φωτός και θερμότητας (Light & Heat Energy technology) την LHE.

Η τεχνολογία LHE έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να θεραπεύσει την ακμή συνδυάζοντας φως και άμεση θερμότητα, επιταχύνοντας έτσι την διαδικασία ίασης.

Γνωρίστε τη συσκευή προσώπου no! no! Skin**Κεντρική μονάδα**

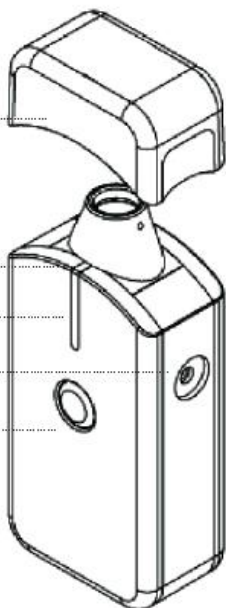
Κάλυμμα

Κεφαλή

Ένδειξη led

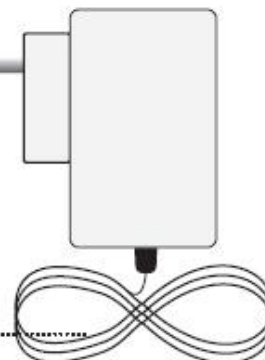
Υποδοχή φορτιστή

Κουμπί λειτουργίας

**Φορτιστής**

Σύνδεση με πρίζα τοίχου

Βύσμα φορτιστή

**Αντενδείξεις****Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή προσώπου no! no! Skin αν:**

- Πάσχετε από επιληψία.
- Είστε έγκυος ή γαλουχείτε.
- Σε αλλοιώσεις όπως κρεατοελιές, ελιές, γυρισμένες τρίχες, δαγκώματα ή τσιμπήματα εντόμων και αραχνών, μολυσμένες περιοχές, ανοικτές ή ερεθισμένες πληγές.
- Αν το δέρμα σας είναι ευαίσθητο στο φως ή την θερμότητα.

Προσοχή

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή προσώπου no! no! Skin μόνο για την χρήση για την οποία προορίζεται, όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή προσώπου no! no! Skin σε περίπτωση που λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση της ακμής. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον θεράποντα ιατρό σας αν λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή.
- Αν νιώσετε οποιαδήποτε αναπάντεχη αντίδραση, διακόψτε την χρήση της συσκευής προσώπου no! no! Skin και συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.
- Η συσκευή προσώπου no! no! Skin μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα ηλικίας 14 χρονών και άνω.

Προφυλάξεις

- Κουράρετε μόνο τις περιοχές που επηρεάζονται από ακμή.
- Κουράρετε το κάθε σπυράκι ξεχωριστά.
- Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της θεραπείας νιώσετε την κεφαλή να θερμαίνεται υπερβολικά, αφαιρέστε την και πατήστε το κουμπί για να σταματήσετε την κούρα.
- Κρατήστε τη συσκευή προσώπου no! no! Skin καθώς και τον φορτιστή μακριά από νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή προσώπου no! no! Skin αν αυτή έχει πέσει στο νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή προσώπου no! no! Skin όταν κάνετε μπάνιο ή αν στέκεστε μέσα σε νερό.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή προσώπου no! no! Skin από το φορτιστή πριν την χρήση, τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή προσώπου no! no! Skin ή το φορτιστή της αν έχουν οποιοδήποτε είδους φθορά.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή προσώπου no! no! Skin με τον αυθεντικό της φορτιστή.
- Κρατάτε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα περιβάλλοντα και θερμές επιφάνειες, όπως σόμπες και καλοριφέρ.
- Μην ανοίγετε την εξωτερική θήκη της συσκευής προσώπου no! no! Skin. Μπορεί να προκαλέσετε φθορά στη συσκευή.
- Μην ρίχνετε ή χτυπάτε τη συσκευή προσώπου no! no! Skin, καθώς μπορεί να προκληθεί εσωτερική ζημιά στη συσκευή.

Παρενέργειες

Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις οι χρήστες μπορεί να νιώσουν ερεθισμό του δέρματος ή αίσθημα ζέστης. Σε περίπτωση που αισθανθείτε οποιαδήποτε από αυτά, αφαιρέστε τη συσκευή από το πρόσωπό σας και σταματήστε την κούρα

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή προσώπου no! no! Skin**Πριν την χρήση**

Πριν την χρήση της συσκευής προσώπου no! no! Skin, υπάρχουν κάποια πράγματα που θα σας βοηθήσουν να κάνετε την κούρα πιο άνετη και αποτελεσματική. Σας προτείνουμε, πριν την χρήση, να δοκιμάσετε τη συσκευή προσώπου no! no! Skin στο χέρι σας, ώστε να εξοικειωθείτε με την αίσθηση του παλμού. Βεβαιωθείτε ότι το δέρμα σας είναι καθαρό και στεγνό πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή προσώπου no! no! Skin. Για να βεβαιωθείτε ότι κουράρετε μόνο ένα σπυράκι κάθε φορά, ειδικά σε περιοχές που δεν φαίνονται εύκολα, χρησιμοποιήστε έναν καθρέπτη.







Προετοιμασία

Φορτίστε τη συσκευή προσώπου no! no! Skin καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας πριν την πρώτη χρήση.

Επαναφορτίστε τη συσκευή προσώπου no! no! Skin έπειτα από κάθε χρήση, μέχρι το κόκκινο/πορτοκαλί φως να πάψει να αναβοσβήνει και να ανάψει το πράσινο φως.

Πριν να ξεκινήσετε τη θεραπεία, αποσυνδέστε το φορτιστή από την ηλεκτρική παροχή και αποσυνδέστε τη συσκευή προσώπου no! no! Skin.

Χρήση

<p>Βήμα 1</p>		<p>Αφαιρέστε το κάλυμμα.</p>	<p>Βήμα 4</p>		<p>Κρατήστε τη συσκευή προσώπου no! no! Skin σε πλήρη επαφή με το σπυράκι για 10 δευτερόλεπτα.</p>
<p>Βήμα 2</p>		<p>Τοποθετήστε τη συσκευή προσώπου no! no! Skin απευθείας πάνω από το σπυράκι και σε πλήρη επαφή με το δέρμα σας.</p>	<p>Βήμα 5</p>		<p>Αφαιρέστε τη συσκευή προσώπου no! no! Skin αφού ακούσετε δύο «μπιπ».</p>
<p>Βήμα 3</p>		<p>Πιέστε το κουμπί. Θα ακουστεί ένα «μπιπ», το οποίο σηματοδοτεί την αρχή της κούρας.</p>	<p>Βήμα 6</p>		<p>Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και κουράρετε ξανά το ίδιο σπυράκι.</p>

Θυμηθείτε

- Μία κούρα διαρκεί 10 δευτερόλεπτα.
- Ένα «μπιπ» σηματοδοτεί την αρχή της κούρας.
- Ένα φως θα αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της κούρας.
- Ένα διπλό «μπιπ» σηματοδοτεί τη λήξη της κούρας.
- Κουράρετε κάθε σπυράκι δύο φορές την ημέρα. Κάθε συνεδρία θα πρέπει να απέχει 6-12 ώρες από την επόμενη.
- Κουράρετε κάθε σπυράκι δύο φορές σε κάθε συνεδρία.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ**Φορτίζοντας τη συσκευή προσώπου no! no! Skin**

- Φορτίστε τη συσκευή προσώπου no! no! Skin καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
- Επαναφορτίστε τη συσκευή προσώπου no! no! Skin έπειτα από κάθε χρήση, μέχρι το κόκκινο/πορτοκαλί φως να πάψει να αναβοσβήνει και να ανάψει το πράσινο φως.
- Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή προσώπου no! no! Skin δεν λειτουργεί όσο είναι συνδεδεμένη με το φορτιστή.
- Φορτίζετε τη συσκευή προσώπου no! no! Skin τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο, είτε την χρησιμοποιείτε είτε όχι.
- Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να καταλάβετε τις διαφορετικές σημασίες του δείκτη LED.

Δείκτης LED	Σημασία	Απαραίτητη Δράση
Πορτοκαλί/Κόκκινο φώς που αναβοσβήνει	Φόρτιση	
Σταθερό πράσινο	Πλήρης φόρτιση	
3 «μπιπ» μακράς διάρκειας	Χαμηλή μπαταρία	Χρειάζεται φόρτιση, αλλά η συσκευή είναι ακόμα λειτουργική
Σταθερό πορτοκαλί για 10 δευτερόλεπτο	Πολύ χαμηλή μπαταρία	Φορτίστε άμεσα, η συσκευή δεν θα λειτουργήσει

Οδηγίες καθαρισμού

Για να αποφύγετε την πιθανότητα μόλυνσης, καθαρίζετε προσεκτικά την κεφαλή της συσκευής προσώπου no! no! Skin πριν και μετά από κάθε χρήση. Βουτήξτε ένα καθαρό κομμάτι γάζας ή υφάσματος σε καθαρό οινόπνευμα και τρίψτε απαλά την κεφαλή της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή είναι εντελώς στεγνή πριν από την επόμενη χρήση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων


Η συσκευή προσώπου no! no! Skin είναι σχεδιασμένη ώστε να σας προσφέρει μια μέθοδο αντιμετώπισης της ακμής χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, κατά καιρούς, μπορεί να εμφανιστούν κάποια προβλήματα.

Τι να κάνω αν...






- **Η συσκευή προσώπου no! no! Skin δεν εκπέμπει παλμό;**
Ελέγξτε τον δείκτη ισχύος ώστε να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή προσώπου no! no! Skin έχει φορτιστεί πλήρως. Επαναφορτίστε τη συσκευή.
- **Έχω φορτίσει τη συσκευή προσώπου no! no! Skin, αλλά ο δείκτης ισχύος παραμένει στο χαμηλό επίπεδο και δεν εκπέμπει παλμό;**
Ελέγξτε το καλώδιο του φορτιστή και το βύσμα για τυχόν ζημιές. Δοκιμάστε κάποια άλλη πρίζα, η πρίζα που χρησιμοποιείτε μπορεί να μην λειτουργεί σωστά.
- **Θέλω να ταξιδέψω σε κάποια άλλη χώρα;**
Η συσκευή προσώπου no! no! Skin μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε χώρα. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένας μετατροπέας που θα μπαίνει στην πρίζα της χώρας στην οποία πηγαίνετε. Σε περίπτωση που ταξιδεύετε μέσω αεροπλάνου, σας προτείνουμε να αποθηκεύσετε τη συσκευή στη βαλίτσα σας, ώστε να αποφύγετε τυχόν προβλήματα ασφάλειας.

Περιγραφή αυτοκόλλητων ετικετών

Σε αυτό το τμήμα περιγράφονται οι αυτοκόλλητες ετικέτες που υπάρχουν κολλημένες πάνω στη συσκευή προσώπου no! no! Skin. Σας προτείνουμε οι χρήστες να ενημερωθούν για τη σημασία αυτών των ετικετών για την καθημερινή χρήση, σε περίπτωση που χρειάζονται τυχόν λεπτομέρειες για το σέρβις. Ο παρακάτω πίνακας περιέχει μια σύντομη επισκόπηση μερικών διεθνώς αναγνωρίσιμων συμβόλων που βρίσκονται πάνω στη συσκευή προσώπου no! no! Skin και στην εξωτερική συσκευασία. Το αυτοκόλλητο βρίσκεται πάνω στη συσκευή.

Ετικέτα	Τοποθεσία και σχόλια
	Βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής. Αυτή η ετικέτα περιλαμβάνει λεπτομέρειες κατασκευαστή, πρότυπα διεθνή σύμβολα και τον σειριακό αριθμό του συστήματος.

Πρότυπα διεθνή σύμβολα

Σύμβολο	Σημασία
	Βαθμός προστασίας έναντι σε ηλεκτρικό σοκ.
	Το σύμβολο CE παρουσιάζει τη συμμόρφωση με την οδηγία Ευρωπαϊκών Ιατρικών Συσκευών 93/42/EEC, συσκευή κλάσης IIa. Ο αριθμός (0344) είναι το βεβαιωτικό σώμα, DEKRA notified Body.
	Αυτό το σύμβολο στην ετικέτα που βρίσκεται προσκολλημένη στην συσκευή σημαίνει «Προσοχή, συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα».
	Κατασκευαστής
	Προστατεύστε το περιβάλλον, απορρίπτοντας το προϊόν ξεχωριστά από τα οικιακά σκουπίδια (2002/96/EC).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πηγή φωτός	Λυχνία αλογόνου με Ενέργεια Φωτός και Θερμότητας (LHE)
Έκταση Μήκους κύματος	480 – 2000 nm
Πυκνότητα Ενέργειας	6 J/cm ²
Αλληλουχία παλμών	20 παλμοί ανά εφαρμογή
Περιοχή Αγωγής	0.5 cm ²
Διάρκεια Αγωγής	10 δευτερόλεπτα
Κατάταξη	Συσκευή εσωτερικής ηλεκτροδότησης, τύπου BF
Είδος λειτουργίας	Σύντομη Λειτουργία
Συνθήκες Λειτουργίας	Περιβάλλουσα θερμοκρασία +5°- 35°
Ηλεκτρικές Απαιτήσεις Φορτιστή Μπαταρίας	Ηλεκτρική παροχή τάσης 100 – 240 VAC, 50/60H

Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250