

**ΣΕΤ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΡΩΝ ΡΕΔΙΜΑΧΧ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ****Οδηγίες ασφαλείας**

- Η συσκευή έχει κατασκευαστεί να αφαιρεί τους κάλους και το ξηρό δέρμα από τα πόδια σας, μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε απαλό δέρμα.
- Το προϊόν είναι σχεδιασμένο για οικιακή και όχι εμπορική χρήση.
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη.

Κίνδυνος τραυματισμού

- Κρατήστε τη συσκευή και τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά και ζώα. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και ασφυξίας!
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες ψυχικές, σωματικές ή κινητικές ικανότητες ή/και από άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με την συσκευή.
- Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε αν η συσκευή, το εξάρτημα για τρίψιμο ή το εξάρτημα περιποίησης βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Αν είναι παραμορφωμένα ή έχουν υποστεί φθορές μπορεί να σας τραυματίσουν το δέρμα.
- Ελέγχετε τακτικά την περιοχή που περιποιείστε για να αποφύγετε το ρίσκο να εισχωρήσετε βαθιά στο δέρμα σας και να προκαλέσετε τραυματισμούς.
- Βεβαιωθείτε ότι τα περιστρεφόμενα σημεία της συσκευής έρχονται σε επαφή μόνο με τους κάλους. Μην τα αγγίζετε με τα δάχτυλά σας.
- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε τραυματισμένο, μολυσμένο, καμμένο από τον ήλιο δέρμα, ή πολύ κοντά σε σπυράκια, ελιές ή εξωγκομένες φλέβες. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή αν υποφέρετε από αιμοφιλία, διαβήτη, ανοσοανεπάρκεια.
- Αν έχετε δερματικά προβλήματα στο πόδια σας, συμβουλευτείτε έναν γιατρό πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή.
- Για λόγους υγιεινής, κάθε εξάρτημα πρέπει να χρησιμοποιείται από ένα μόνο άτομο. Δεν συνίσταται να μοιράζεστε το προϊόν.


Κίνδυνος φωτιάς

- ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μπαταρίες μπορεί να είναι θανατηφόρες αν καταποθούν! Γι' αυτό το λόγο, κρατήστε τις μπαταρίες και το προϊόν μακριά από παιδιά. Αν μια μπαταρία καταποθεί, ζητήστε ιατρική βοήθεια άμεσα.
- Πριν εισάγετε τις μπαταρίες, ελέγξτε αν οι επαφές των κεριών ή του τηλεχειριστήριου και των μπαταριών είναι καθαρές. Καθαρίστε τις αν χρειάζεται.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις σωστές μπαταρίες.
- Πάντα να αντικαθιστάτε τις μπαταρίες ταυτόχρονα. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικού τύπου ή μάρκας, ή μπαταρίες με διαφορετική χωρητικότητα. Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες, προσέχετε τη σωστή πολικότητα (+/-).
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το κερύ αν έχουν εξαντληθεί ή αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό θα αποτρέψει βλάβη που μπορεί να προκύψει από διαρροή μιας μπαταρίας.
- Αν μια μπαταρία έχει διαρροή, μην επιτρέπετε να έρθει σε επαφή το δέρμα, τα μάτια και οι βλενογόνοι αδένες σας με το υγρό της μπαταρίας. Αν αγγίξετε υγρό μπαταρίας, ξεπλύνετε τις περιοχές που ακούμπησαν με άφθονο νερό αμέσως και επικοινωνήστε με έναν γιατρό το συντομότερο δυνατόν.
- Αφαιρέστε μια μπαταρία που έχει διαρροή από το προϊόν αμέσως. Καθαρίστε τις επαφές πριν εισάγετε νέα μπαταρία.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτιστούν με κανένα τρόπο, να αποσυναρμολογηθούν, να απορριφθούν σε φωτιά, να βυθιστούν σε υγρά, ή να βραχυκυκλωθούν.

Φθορά συσκευής και εξαρτημάτων

- Αν η συσκευή έχει υποστεί φθορά, μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας και μην προσπαθήσετε να αντικαταστήσετε τα εξαρτήματα οι ίδιοι. Σε περίπτωση βλάβης επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε υπερβολικές θερμοκρασίες, μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας, απευθείας ηλιακό φως ή υγρασία.
- Κρατάτε επαρκή απόσταση από πηγές θερμότητας όπως εστίες κουζίνας, φούρνους, τζάκια ή αναμμένα κεριά.
- Μην ρίχνετε το προϊόν κάτω και μην το χτυπάτε.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν μπορεί να βραχεί ή να πέσει σε νερό.
- Μην αφήνετε το προϊόν να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Σβήνετε την συσκευή όταν δεν την χρησιμοποιείτε και κλείνετε το προστατευτικό καπάκι.

Περιεχόμενα και σύνοψη συσκευής

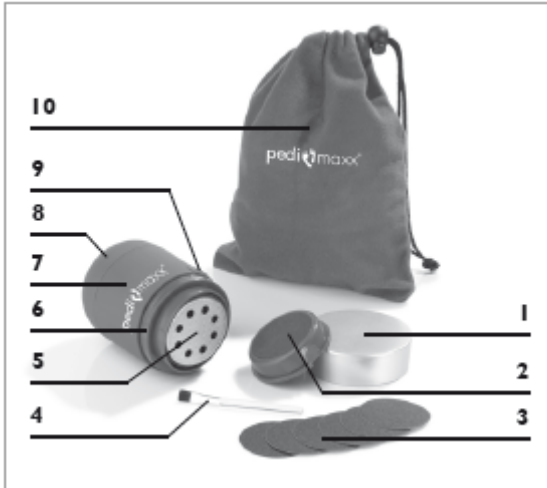


1. Προστατευτικό καπάκι
2. Εξάρτημα περιποίησης
3. Επιθέματα περιποίησης (X6)
4. Βούρτσα καθαρισμού
5. Εξάρτημα τριψίματος
6. Προστατευτικός δακτύλιος
7. Βασική μονάδα
8. Καπάκι της βασικής μονάδας
9. On/off διακόπτης
10. Τσαντάκι αποθήκευσης

Θέτοντας την συσκευή σε λειτουργία Αποσυσκευάζοντας την συσκευή

Αποσυσκευάστε όλα τα παρεχόμενα εξαρτήματα και ελέγξτε ότι είναι όλα παρόντα και δεν έχουν φθορές από τη μεταφορά. Αν βρείτε κάποια βλάβη ή φθορά, μην τα χρησιμοποιήσετε (!), αλλά επικοινωνήστε άμεσα με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Εισάγοντας τις μπαταρίες

- Χρειάζεστε τέσσερις μπαταρίες 1.5 V τύπου AA. Δεν περιλαμβάνονται στην συσκευή.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες την σωστή στιγμή όταν η ισχύς της συσκευής έχει μειωθεί.

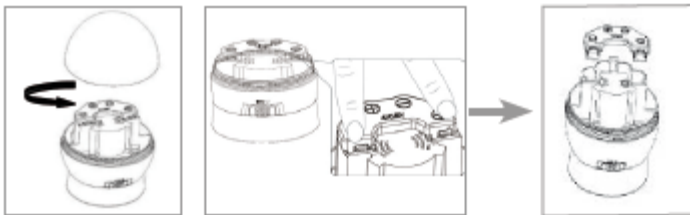

1. Ξεβιδώστε το καπάκι από την βασική μονάδα γυρνώντας το αριστερόστροφα.
2. Πιέστε τους δύο λοβούς ασφαλείας του θαλάμου μπαταριών και αφαιρέστε το καπάκι από τον θάλαμο μπαταριών.
3. Εισάγετε τέσσερις 1.5 V μπαταρίες τύπου AA (δεν περιλαμβάνονται) μέσα στον θάλαμο μπαταριών. Να είστε προσεκτικοί με την πολικότητα.
4. Τοποθετήστε το καπάκι του θαλάμου μπαταριών πίσω στην θέση του και κλείστε το καλά μέχρι να ασφαλίσει.
5. Βιδώστε το καπάκι στην βασική μονάδα.

Τοποθετώντας/εισάγοντας τα εξαρτήματα

- Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι από την βασική μονάδα.

Εξάρτημα τριψίματος


- Πριν την πρώτη χρήση, αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από τον εξάρτημα τριψίματος.
- Το εξάρτημα τριψίματος διαθέτει δύο μέρη. Διαθέτει ένα δίσκο τριψίματος και μία υποδοχή.



1. Συναρμολογήστε το εξάρτημα τριψίματος. Για να το κάνετε αυτό, πιέστε τους δύο πύρους ασφαλείας του δίσκου τριψίματος μέσα στις δύο εσοχές της υποδοχής και σφίξτε τον δίσκο τριψίματος δεξιόστροφα μέχρι να νιώσετε κάποια αντίσταση.



2. Σπρώξτε το εξάρτημα τριψίματος πάνω στον άξονα της βασικής μονάδας μέχρι το όριο.

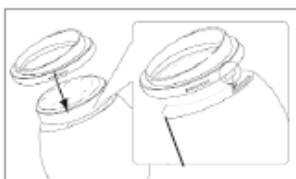

3. Εφαρμόστε τον προστατευτικό δακτύλιο στην βασική μονάδα και στρίψτε το αριστερόστροφα.

Εξάρτημα περιποίησης



1. Σπρώξτε το εξάρτημα περιποίησης πάνω στον άξονα της βασικής μονάδας προς το όριο.
2. Εφαρμόστε τον προστατευτικό δακτύλιο στην βασική μονάδα και γυρίστε τον αριστερόστροφα (βλ. Παράγραφο «Εξάρτημα Τριψίματος», βήμα 3)

Για να αφαιρέσετε ένα εξάρτημα, πρώτα αφαιρέστε τον προστατευτικό δακτύλιο (γυρίστε τον δεξιόστροφα) κι έπειτα αφαιρέστε το εξάρτημα από την βασική μονάδα.

Ανάβοντας και σβήνοντας την συσκευή



Ο διακόπτης on/off έχει τις ακόλουθες λειτουργίες:

- = off
- ◐ = αργό
- = γρήγορο

Γυρίστε τον διακόπτη στην ρύθμιση που επιθυμείτε.

Αν χρησιμοποιείτε την συσκευή για πρώτη φορά, γυρίστε τον διακόπτη στην ρύθμιση ◐ για να εξοικειωθείτε με την συσκευή. Σας συνιστούμε την ρύθμιση ◐ για την αφαίρεση των πιο λεπτών κάλων (πχ. Στα δάχτυλά σας) και την ρύθμιση ● για του πιο χοντρούς κάλους. (πχ. Στις φτέρνες)

Χρήση

- Αν νιώσετε πόνο ή δερματικούς ερεθισμούς κατά τη διάρκεια χρήσης της συσκευής, σταματήστε αμέσως την χρήση.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε ένα μόνο σημείο του δέρματός σας για πάνω από 5 λεπτά.



Προετοιμασία του δέρματος

Πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή, πλύνετε τα πόδια σας και στεγνώστε τα καλά. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα κρέμας ή λαδιού πάνω τους.

Όσο πιο στεγνό είναι το δέρμα τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχει η συσκευή.

Αφαίρεση κάλων

Χρησιμοποιείτε το εξάρτημα τριψίματος μόνο στους χοντρούς κάλους.

1. Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι από την βασική μονάδα.
2. Αν δεν έχει ήδη τοποθετηθεί, τοποθετήστε το εξάρτημα τριψίματος στην βασική μονάδα. Πριν την πρώτη χρήση, η ταινία πρέπει να αφαιρεθεί από το εξάρτημα τριψίματος.
3. Αρχικά, γυρίστε την συσκευή στην ρύθμιση . Για να περιποιηθείτε και να αφαιρέσετε τους σκληρούς κάλους (π.χ. στις φτέρνες) γυρίστε τον διακόπτη στην ρύθμιση .
4. Εφαρμόστε το εξάρτημα τριψίματος πάνω στον κάλο που πρόκειται να αφαιρέσετε και κινείτε την συσκευή πάνω στον κάλο με μικρές κυκλικές κινήσεις. Κινείτε την συσκευή αργά και χωρίς πίεση. Αν πιέζετε την συσκευή πολύ δυνατά πάνω στο δέρμα σας, το εξάρτημα θα σταματήσει αυτόματα για να αποτρέψει τυχόν τραυματισμούς.
5. Να ελέγχετε την περιοχή που περιποιείστε συχνά κατά τη διάρκεια χρήσης για να μην τραυματίσετε το δέρμα σας.
6. Περιποιηθείτε κάθε πόδι σας για περίπου ένα λεπτό, μέχρι να σταματήσει τις παχιές στρώσεις των κάλων. Έπειτα, σβήστε την συσκευή και περιμένετε μέχρι να σταματήσει το εξάρτημα τριψίματος και αφαιρέστε τον προστατευτικό δακτύλιο και το εξάρτημα τριψίματος από την βασική μονάδα.

Περιποίηση άκρων

1. Συνδέστε το εξάρτημα περιποίησης στην βασική μονάδα.
2. Γυρίστε την συσκευή στην επιθυμητή ρύθμιση ταχύτητας και περιποιηθείτε το δέρμα που φροντίσατε προηγουμένως. Επαναλάβετε το ίδιο με το εξάρτημα περιποίησης αυτήν την φορά.
3. Έπειτα, σβήστε την συσκευή και περιμένετε μέχρι να ακινητοποιηθεί το εξάρτημα περιποίησης και αφαιρέστε τον προστατευτικό δακτύλιο και το εξάρτημα περιποίησης από την βασική μονάδα.

Μετά την φροντίδα

1. Μετά την φροντίδα, απλώστε κρέμα πάνω στα πόδια σας για να μαλακώσει το δέρμα σας.
2. Καθαρίστε την συσκευή μετά από κάθε χρήση με την βούρτσα καθαρισμού που περιλαμβάνεται. (βλ. Κεφ. «καθαρισμός και αποθήκευση»)

Καθαρισμός και αποθήκευση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει σβήσει.
- Κανένα υγρό δεν πρέπει να εισχωρεί μέσα στην βασική μονάδα. Μην την βυθίζετε σε νερό και μην την καθαρίζετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε καυστικούς ή αποξεστικούς καθαριστικούς παράγοντες ή πανάκια για να καθαρίζετε την συσκευή.

Για λόγους υγιεινής, η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση.

1. Αν δεν το έχετε ήδη κάνει, αφαιρέστε τον προστατευτικό δακτύλιο και το εξάρτημα που έχετε χρησιμοποιήσει, από την βασική μονάδα.
2. Εξάρτημα τριψίματος: Αφαιρέστε το εξάρτημα τριψίματος. Για να το κάνετε αυτό, γυρίστε τον δίσκο τριψίματος αριστερόστροφα και αφαιρέστε το από την υποδοχή.



3. Αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα δέρματος με την βούρτσα καθαρισμού που σας παρέχεται. Αν πρέπει, μπορείτε επίσης να ξεπλύνετε τον δίσκο τριψίματος και την υποδοχή με καθαρό, ζεστό νερό.
4. Αφήστε τα δύο μέρη να στεγνώσουν καλά πριν ξανατοποθετήσετε το εξάρτημα τριψίματος.
5. Εξάρτημα περιποίησης: Επίσης, βουρτσώστε καλά το εξάρτημα περιποίησης με την βούρτσα καθαρισμού που σας παρέχεται. Καθαρίστε το εξάρτημα αν χρειάζεται με οινόπνευμα ή καθαρό, κρύο νερό.
6. Αφήστε το εξάρτημα περιποίησης να στεγνώσει καλά.

Τα επίθεμα περιποίησης μπορούν να αντικατασταθούν. Για να το κάνετε, αφαιρέστε το παλιό επίθεμα από το εξάρτημα περιποίησης, βγάλτε την προστατευτική ταινία από ένα νέο επίθεμα και κολλήστε το νέο επίθεμα πάνω στο εξάρτημα περιποίησης.

7. **Βασική μονάδα.** Αν είναι απαραίτητο, καθαρίστε την βασική μονάδα με ένα ελαφρώς νωπό πανί. Έπειτα, στεγνώστε το καλά με ένα απαλό ύφασμα.



8. Συνδέστε το εξάρτημα τριψίματος στην βασική μονάδα.
9. Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι πάνω στην βασική μονάδα. Ο προστατευτικός δακτύλιος πρέπει να εφάπτεται στην βασική μονάδα ώστε το προστατευτικό καπάκι να βρίσκεται στην θέση του.
10. Αποθηκεύστε την συσκευή και τα εξαρτήματά της στο τσαντάκι αποθήκευσης που σας παρέχεται, σε στεγνό και ξηρό μέρος που δεν είναι προσβάσιμο από παιδιά ή κατοικίδια.

Λύση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία/Λύση
Η συσκευή δε λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none"> • Μήπως οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί ή δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά; • Εισάγετε νέες μπαταρίες.
Η συσκευή σταματά κατά τη διάρκεια της χρήσης της.	<ul style="list-style-type: none"> • Μην χρησιμοποιείτε πολύ πίεση. Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή σταματά αυτόματα όταν ασκείτε μεγάλη πίεση στο δέρμα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο : TV80038

Κωδικός προϊόντος: Z 04404

Παροχή ρεύματος: 6 V DC (4 x 1,5 V μπαταρία τύπου AA) Δεν περιλαμβάνονται.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. εγγυάται τη καλή λειτουργία του προϊόντος.
- Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε 6 (έξι) μήνες. Η χρονική έναρξη της εγγυήσεως είναι η ημερομηνία αγοράς.
- Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από το παραστατικό της αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο)
- Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και κακοτεχνίες.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή αλλοιώσεις που έχουν προκληθεί από εσφαλμένη ή κακή χρήση του προϊόντος, εκτός των τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής.
- Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. διαθέτει δικό της τεχνικό τμήμα (service) για την επιδιόρθωση και συντήρηση των προϊόντων. Τα προϊόντα προς έλεγχο μπορούν να παραδίδονται στα καταστήματα του δικτύου Telemarketing Store ή να αποστέλλονται στη διεύθυνση της εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - **210 2708250**